



OlyLife Vitality Wand

Shine with Terahertz Wave

OlyLife Vitality Wand

\$600 + + 10 % zusätzlich

Dies beinhaltet Versand und Mehrwertsteuer

Der Vitality Wand bietet eine tief entspannende Anwendung, ideal zum Abschalten nach der Arbeit oder zur Beruhigung verspannter Bereiche. Durch die Kombination von Terahertz-Wellen, sanften Magnetwellen, einstellbarer Wärme und einer sanften Luftstrommassage hilft er dem Körper, sich entspannter, beweglicher und leichter zu fühlen. Der freihändige Stand und die Ein-Knopf-Bedienung machen die Anwendung einfach und sorgen für ein gleichmäßiges, spa-ähnliches Erlebnis zu Hause.

Funktionen

- Unterstützt eine gesunde Mikrozirkulation
- Hilft, muskuläre Spannungen zu lösen
- Unterstützt die natürliche Entgiftung
- Fördert den Meridianfluss und das allgemeine Wohlbefinden des Körpers

Hauptmerkmale

- Terahertz-Wellen-Ausgabe
- PEMF ultralange Magnetwellen
- Einstellbare Wärmekomfort-Stufen
- Gleichmäßige Luftdruckmassage
- Intelligenter freihändiger Stand



Das originale „weltweit erste“ Dual-Frequenz-Gerät (PEMF und Terahertz-Energiewellen)

Dyson bürstenloser Motor (120.000 U/min bei 1.200 Watt)

3 Heizstufen + 1 Kühlstufe

Inklusive patentiertem intelligenten motorisierten oszillierenden Standfuß
(Wert: 200,00 \$)

100 PATENTE

Der einzigartige OlyLife Vitality Wand vereint firmeneigene technische Entwicklungen und Designmerkmale von OlyLife. Das Gerät ist für allgemeines Wohlbefinden konzipiert und spiegelt den Fokus des Unternehmens auf Innovation in der Wellness-Technologie, Qualität und Nutzererlebnis wider.



Terahertz-Wellen

PEMF ultralange Wellen

Wärmeenergieübertragung

Luftmassage



Unterstützt die
Zellgesundheit

PEMF ultralange Wellen

Verbessert die
Mikrozirkulation

Lymphatische
Entgiftung

Entfernung von
Kälte und
Feuchtigkeit



Öffnet die Meridiane

Terahertz-Wellen

PEMF ultralange Wellen

Wärmeenergieübertragung

Luftmassage



OlyLife


Empfohlenes Protokoll

Zuerst hydratisieren, dann mit dem Gerät die Schritte 1 bis 10 durchführen

Mindestens 1+ Minute pro Bereich in kreisenden Bewegungen im Uhrzeigersinn



Trinke 2 Gläser warmes Wasser

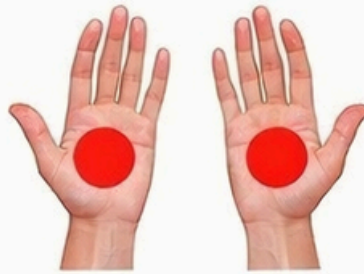


1 Beide Handflächen



2 Beide Fußsohlen



3
Hinter
den Knien

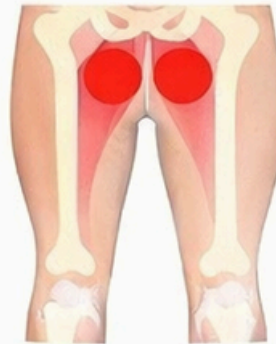

4 Leistenbereich



5 Beide
Achselhöhlen



6 Beide Seiten
des Halses
(Vagusnerv & Lymphe)




7 Oberer Rücken



8 Oberkopf*



9 Gesäß

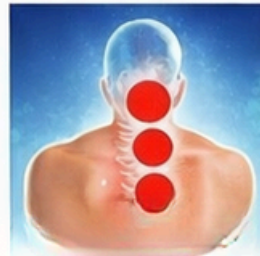

10 Entlang der
Wirbelsäule
(Stammzellaktivierung)



Trinke 2 Gläser warmes Wasser

Konzentriere dich mindestens 10+ Minuten auf Bereiche mit Beschwerden

Nicht direkt in das blaue Licht des Vitality Wand schauen

*Nicht am Oberkopf anwenden bei hohem Blutdruck

Die ultralange Welle ist eine Form eines niederfrequenten wechselnden Magnetfeldes. Sie wird durch extrem schnelle Schwingungen erzeugt, die zwischen 7 und 60 Zyklen pro Sekunde liegen, zwischen dem Nord- und Südpol.

► **Dringt tief in den Körper ein**

Ultralange Wellen können leicht verschiedene Materialien (wie Metalle, Glas und Gestein) durchdringen und 20-30 cm tief in den Körper eindringen. Sie können innere Problembereiche erreichen und Akupunkturpunkte stimulieren, ähnlich den Prinzipien der Akupunktur.

► **Vibration verbessert die Durchblutung**

Sie kann Spurenelemente im Körper (wie Kohlenstoff, Sauerstoff, Magnesium und Eisen) magnetisieren. Mit der Zeit und durch die Veränderung der Richtung des Magnetfeldes entsteht Resonanz, die den Sauerstoffstoffwechsel verbessert und die Durchblutung beschleunigt.



Verbessert die Durchblutung

Entfernung von Kälte und

Öffnet die Meridiane

Terahertz-Wellen	PEMF ultralange Wellen	Wärmeenergieübertragung	Luftmassage
------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------

► **Automatische Anpassung der Luftstromgeschwindigkeit und Temperatur bei jeder Einstellung**

► **Ein-Knopf-Bedienung, die den Nutzungskomfort deutlich erhöht**



Einstellungen / Temperatur	Anwendungsszenarien
Einstellung 1 60°C	Fördert die Durchblutung und den Stoffwechsel, lindert Muskelverspannungen und Steifheit. Geeignet für Personen, die über längere Zeit die gleiche Haltung einnehmen, wie Büroangestellte und Fahrer, sowie zur Erholung nach dem Training.
Einstellung 2 70°C	Bietet tiefe Linderung für Muskeln und Gelenke und kann bei Beschwerden wie Arthritis und Rheuma unterstützen.
Einstellung 3 80°C	Geeignet für Personen mit chronischen Beschwerden wie Arthritis und Rheuma.

Öffnet die Meridiane

Terahertz-Wellen	PEMF ultralange Welle	Wärmeenergieübertragung	Luftmassage
------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------




OlyLife

► Der einströmende Luftstrom ist stark
Optimiertes hinteres Luftgittersystem, das die Ansaugfläche im Vergleich zum vorherigen Modell um mehr als das Dreifache vergrößert.

► Hohe Luftstromgeschwindigkeit
Verwendet importierte ultrahochgeschwindige Zentrifugalventilatoren mit einer maximalen Drehzahl von 120.000 U/min. Das kompakte Design sorgt für eine Luftstromgeschwindigkeit von 23 Metern pro Sekunde.


► Sicher in der Anwendung, verhindert Verbrennungen bei versehentlichem Kontakt
Schneller Wärmeenergieübertrag bei minimaler Erwärmung der Geräteoberfläche. Die Temperatur am Luftauslass wird auf unter 65°C reduziert.

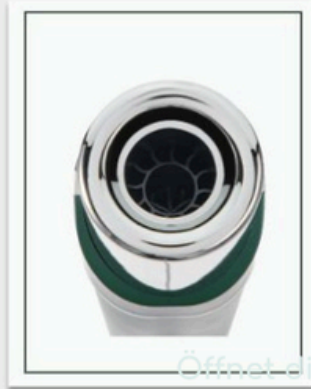

Öffnet die Meridiane

Terahertz-Wellen	PEMF ultralange Welle	Wärmeenergieübertragung	Luftmassage
------------------	-----------------------	-------------------------	-------------

- Verwendet eine intelligente Halterung zur Steuerung
- Freihändige Nutzung
- Mehrere Modi können frei gewechselt werden
- Automatische 60°-Rotation
- Automatische Abschaltung nach 45 Minuten
- Automatische Neupositionierung. Nach dem Ausschalten dreht sich das Gerät automatisch in einen weiten Winkel, um einen versehentlichen Kontakt mit dem Körper zu vermeiden

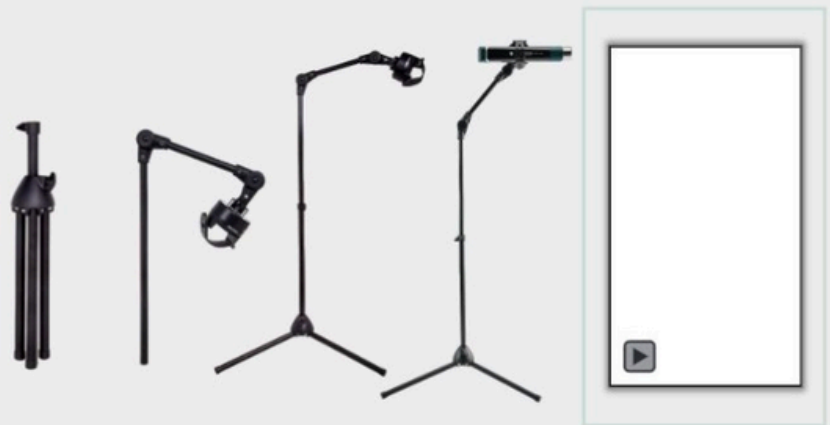

Öffnet die Meridiane

Stilvoll

Technologisch

Elegant



Öffnet die Meridiane

Funktioniert eigenständig, keine externe Unterstützung erforderlich!



Dynamische Symbolanzeige

- Einstellungen: 0 → 1 → 2
- 45-Minuten-Countdown
- Symbol für Energieabgabe


Das Wechseln der Einstellungen beeinflusst den Countdown nicht

Öffnet die Meridiane



diane

- **Trinke ausreichend Wasser:** Um den Stoffwechsel zu beschleunigen, trinke vor und nach der Anwendung genügend Wasser.
- **Trage leichte Kleidung:** Für optimale Ergebnisse sollten die Energiewellen idealerweise direkten Kontakt mit der Haut haben. Wenn dies nicht möglich ist, trage leichte Kleidung.
- **Anwendungsdauer:** Begrenze jede Anwendung auf maximal 45 Minuten.
- **Während der Menstruation vermeiden:** Die Anwendung während der Menstruation wird nicht empfohlen.
- **Abstand einhalten:** Halte den Luftauslass des Geräts mindestens 20 cm von der Haut entfernt, um Verbrennungen zu vermeiden. Verwende die höchste angenehme Temperatureinstellung, um Überhitzung zu verhindern.

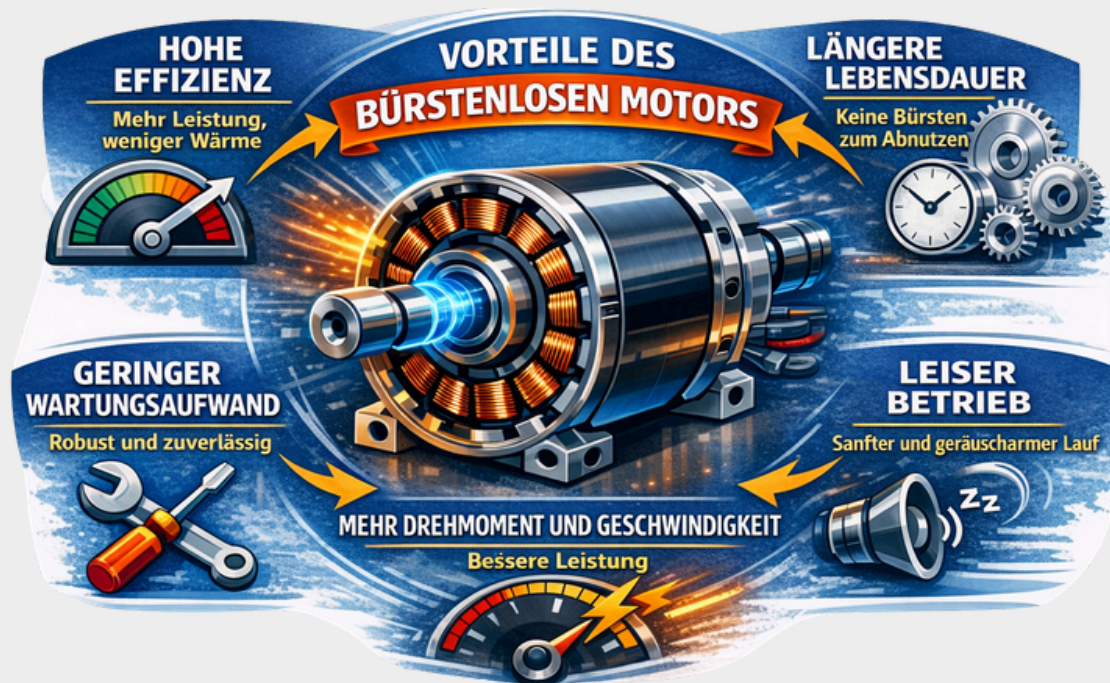

OLYLIFE VITALITY WAND

Vorteile des bürstenlosen Dyson-Motors

Der OlyLife Vitality Wand wird von einem fortschrittlichen bürstenlosen Motor angetrieben, der eine gleichmäßigere Leistung, höhere Langlebigkeit und ein angenehmeres Nutzungserlebnis im Vergleich zu herkömmlichen Geräten mit Bürstenmotor bietet.

Was ist ein bürstenloser Motor?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Motoren, die physische Bürsten zur Bewegungserzeugung nutzen, verwendet ein bürstenloser Motor elektronische Steuerung, um Rotation zu erzeugen. Dieses Design reduziert Reibung und Energieverluste erheblich.

Wichtige Vorteile

Längere Lebensdauer des Motors

Da keine Bürsten verschleifen, hält der Motor deutlich länger und eignet sich ideal für häufige oder langfristige Nutzung.

Leiser Betrieb

Weniger Reibung bedeutet geringere Geräuschentwicklung und minimale Vibrationen, was zu einem entspannteren Nutzungserlebnis führt.

Konstante Leistung

Das bürstenlose Design sorgt für stabile Vibrations- und Intensitätswerte, auch bei längeren Anwendungen.

Höhere Energieeffizienz

Weniger Energie geht in Form von Wärme verloren, was eine längere Akkulaufzeit und bessere Leistung pro Ladung ermöglicht.

Sanfte und präzise Steuerung

Erzeugt feine Mikrovibrationen statt harter Impulse und macht die Anwendung angenehmer und kontrollierter.

Kühlere Betriebsweise

Geringere Wärmeentwicklung sorgt dafür, dass das Gerät angenehm in der Hand liegt und auch bei längerer Nutzung sicher bleibt.

Geringerer Wartungsaufwand

Keine zu ersetzenden Bürsten bedeuten weniger Verschleiß, weniger mechanische Probleme und geringere Wartungskosten im Laufe der Zeit.

Warum das für Wellness-Geräte wichtig ist

Bei Geräten wie dem Vitality Wand sind Präzision, Komfort und Zuverlässigkeit entscheidend. Der bürstenlose Motor sorgt für konstante Leistung, Benutzerkomfort und langfristige Haltbarkeit und verbessert damit das gesamte Nutzungserlebnis.



OlyLife

Vitality Wand

Müdigkeit verfliegt

wie ein Hauch

